

## Combining Ultrafast NMR sequences and hyperpolarization by SABRE

Gaspard Huber, L Guduff, V Daniele, P. Berthault, J.-N Dumez

► **To cite this version:**

Gaspard Huber, L Guduff, V Daniele, P. Berthault, J.-N Dumez. Combining Ultrafast NMR sequences and hyperpolarization by SABRE. HYP18 (International Conference on Nuclear Hyperpolarization), Sep 2018, Southampton, United Kingdom. cea-02340111

**HAL Id: cea-02340111**

**<https://hal-cea.archives-ouvertes.fr/cea-02340111>**

Submitted on 30 Oct 2019

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

## Combining Ultrafast NMR sequences and hyperpolarization by SABRE


G. Huber,<sup>a</sup> L. Guduff,<sup>b</sup> V. Daniele<sup>a</sup>, P. Berthault<sup>a</sup> and J.-N. Dumez<sup>b</sup>,

<sup>a</sup> Commissariat à l'Energie Atomique, Saclay, France.

<sup>b</sup> Institut de Chimie des Substances Naturelles, Gif-sur-Yvette, France.

E-mail: [gaspard.huber@cea.fr](mailto:gaspard.huber@cea.fr)

Signal amplification by reversible exchange (SABRE) is a promising hyperpolarization method using parahydrogen to enhance the sensitivity of NMR experiments. However, SABRE-hyperpolarized NMR signals are short lived, particularly when  $^1\text{H}$  is concerned, and therefore SABRE is often used to record 1D NMR spectra only. When the sample of interest is a complex mixture, this may result in severe spectral overlaps. Here, we describe approaches combining the concepts of SABRE-hyperpolarization [1] and spatially-encoded NMR [2] to obtain clean and sensitive COSY[3] and DOSY[4] spectra of mixtures of small molecules in a single scan. These schemes, respectively displayed on the left and right parts of the Figure, can be used for fast separation of components in a mixture.

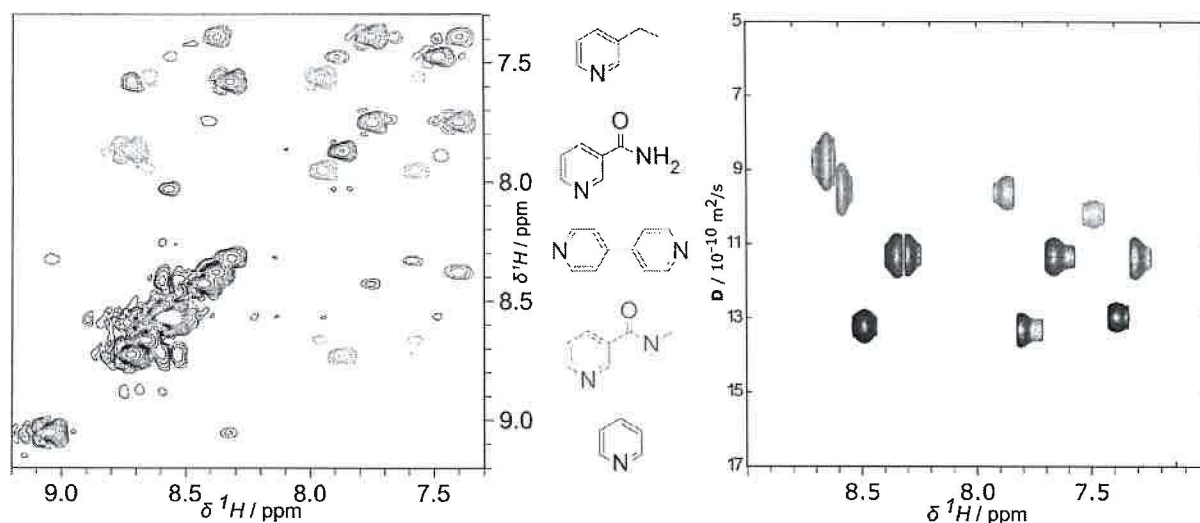

[1] R. W. Adams et al., *Science*, 323, 1708 (2009).

[2] L. Frydman, T. Scherf, A. Lupulescu, *PNAS*, 99, 15858 (2002).

[3] V. Daniele, F.-X. Legrand, P. Berthault, J.-N. Dumez, G. Huber, *ChemPhysChem*, 16, 3413 (2015).

[2] L. Guduff, P. Berthault, G. Huber, J.-N. Dumez, *submitted*.